

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhombo-Care*® Prevent Plus



Die *Rhombo-Care*® **Prevent Plus** ist eine ergonomische **Superweichmatratze** mit sensitiven Flex tubes für weiches Eintauchen, insbesondere bei niedrigem Körpergewicht. Durch die Rhombo-therm®-Auflage ist diese Matratze sehr gut geeignet zur Dekubitusprophylaxe und –therapie und gewährleistet eine optimale Luftzirkulation und hervorragenden Wärmeaustausch.

Matratzenkonstruktion:

| | |
|-------------------|--|
| Material: | Hochwertiger Kaltschaum, schwerentflammbar |
| Matratzenbasis: | RG 45, Stauchhärte 4,5 kPa, mit ergonomischer Lochung |
| Liegefläche: | hochelastische Flex tubes, RG 80, Stauchhärte 2,5 kPa, verbunden mit spezieller Rhombo-therm®-Auflage für weiches Einsinken des Körpers und gute Belüftung |
| Bezüge: | Randzonenverstärkung:RG 55, Stauchhärte 4,5 kPa, Kombinieren Sie die Matratze <i>Rhombo-Care</i> ® Prevent Plus mit drei verschiedenen Matratzenbezügen. |
| Format: | 90x200x15 cm |
| Dauerhaltbarkeit: | nach LGA 100 von 100 Punkten |

Eigenschaften:

Bewegliche Zylinder fördern die Körperwahrnehmung und unterstützen die aktiven Bewegungen.
Höchste Druckreduzierung auch bei geringem bis mittlerem Körpergewicht.
Progressiver Aufbau unterstützt auch das Durchführen von passiven Bewegungen
Randzonenverstärkung erleichtert sicheres Aufstehen und Mobilisieren.
Hervorragende mikroklimatische Eigenschaften bedingen Wohlbefinden.

Einsatzbereich:

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag. Auch bei schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates: Osteoporose, rheumatischen Schmerzzuständen uvm.


Rhombo-Care® Prevent Plus

Variante 1



RC Prevent Plus mit Bezug Rhombo-Care® Air
rundum Strickware
Farbe: weiß/grau
waschbar bis 60 °C
Größe 90 x 200 x 15
Art.Nr. 19.448

Variante 2

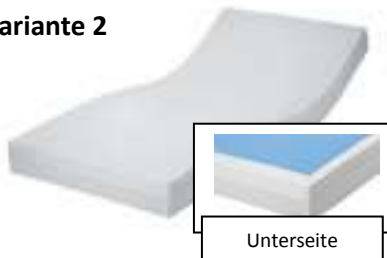

RC Prevent Plus mit Bezug Klintex
Farbe: hellgrau / blau
Wischdesinfektion / kochwaschbar
Größe 90 x 200 x 15
Art.Nr. 19.848

Variante 3



RC Prevent Plus mit Bezug Rhombo-Care®
Semy Plus EA*
Farbe: hellgrau / schwarz
Wischdesinfektion / kochwaschbar
Größe 90 x 200 x 15
Art.Nr. 19.348