


ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhombo-Care*® **Vitaflex Plus**

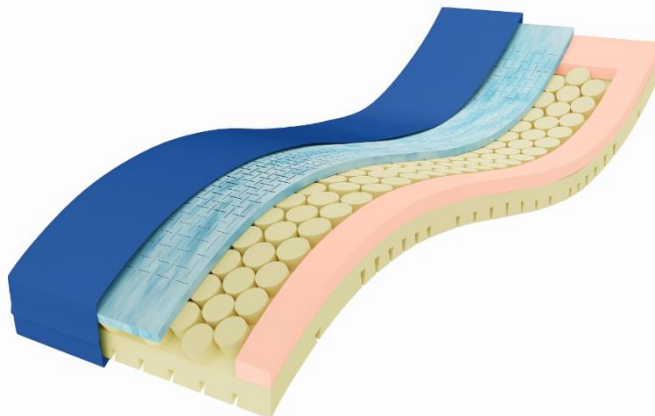

Die Oberseite der *Rhombo-Care*® **Vitaflex Plus** besteht aus hypersoftem Sky-therm® Schaumstoff für eine optimale Körperanpassung. Die angewandte patentierte Rhombo-therm® Stanzung fördert die Punktelastizität sowie Druckverteilung durch das Lösen der Oberflächenspannung. Die mittlere Zone des Matratzenkerns ist aus dynamischen Flextubes gefertigt, welche hochflexibel Körperbewegungen unterstützen. Zudem verbessern diese in Kombination mit der Rhombo-therm® Abdeckung das Mikroklima. Die angebrachte Seitenrandverstärkung gibt Sicherheit in der sitzenden Position und erleichtert das Aufstehen. Die untere Matratzenbasis verfügt über eine 7-Zonen Schnitttechnik an der Unterseite. Damit passt sich die Matratze sehr flexibel an verstellbaren Betten an.

Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger Kaltschaum
Matratzenbasis:	7-Zonen Schnitttechnik an der Unterseite (RG55) mit Seitenrandverstärkung Flextubes (RG55 / 8cm Durchmesser)
Liegefläche:	Sky-therm® mit Rhombo-therm® Stanzung RG40
Bezüge:	Kombinieren Sie die Matratze <i>Rhombo-Care</i> ® Vitaflex Plus mit dem Matratzenbezügen Semy Plus und dem Semy Plus EVA Bezug.
Format:	90x200x15 cm (weiter Größen auf Anfrage)


Eigenschaften:

Die Weichlagerungsmatratze *Rhombo-Care*® **Vitaflex Plus** bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei Dekubitustherapien bis Stadium 4 (EPUAP / Seiler) ihren Beitrag.

Einsatzbereich:

empfohlenes Patientengewicht 20-140kg

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhomb-Care*® **Vitaflex Plus**

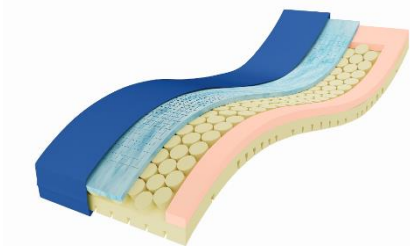


RC® Vitaflex Plus mit Semy-Plus Bezug

Farbe: blau

Rundum:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil
längs- und querelastisch
wasserdicht, bakteriendicht
schwer entflammbar

waschbar bis 95°C

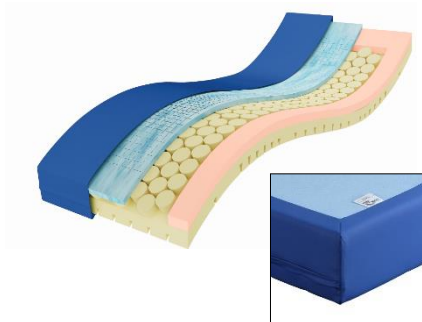

RC® Vitaflex Plus mit Klintex Bezug

Farbe: blau/hellblau

Oberseite und seitlich:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil
längs- und querelastisch
wasserdicht, bakteriendicht
schwer entflammbar

Unterseite:

100% Feinjersey mit Tragegriffen
waschbar bis 95°C



RC® Vitaflex Plus mit Semy-Plus EVA Bezug

Farbe: blau/schwarz

Oberseite und seitlich:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil
längs- und querelastisch
wasserdicht, bakteriendicht
schwer entflammbar

Unterseite:

100% Polyester
Gurtbänder mit Klettverschluss
Griffschlaufen zur Evakuierung
waschbar bis 95°C