


## ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhombo-Care*<sup>®</sup> Therm Plus Extra bis 200 kg Körpergewicht

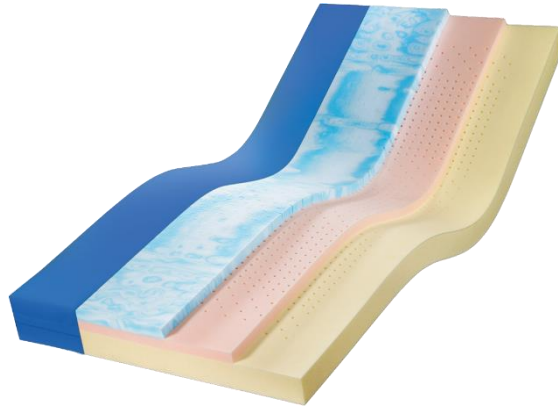

Die *Rhombo-Care*<sup>®</sup> Therm Plus Extra bis 200 kg Körpergewicht besitzt einen dreischichtig progressiven Aufbau - von sehr weich, über mittelfest bis fest. Das *Rhombo-Therm*<sup>®</sup> (Skytherm) leitet weich zur nächsten etwas festeren Matratzenmitte über bis zur Matratzenbasis, die die höchste Materialfestigkeit aufweist. Der festere Seitenrand erleichtert das Aufstehen aus der sitzenden Position vom Bettrand.

### Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger Kaltschaum
Matratzenbasis:	10 cm 7-Zonen Rhombo-Flex KS mit vertikaler Belüftung, RG 55 mit Randzonenverstärkung (fest)
Mittelschicht:	3 cm 7-Zonen Rhombo-Flex KS mit vertikaler Belüftung, RG 55 (mittelfest)
Liegefläche:	3 cm hypersofte <i>Rhombo-Therm</i> <sup>®</sup> -Auflage „Skytherm“
Bezug:	Hygienebezug Semy Plus mit 3-seitigem RV
Format:	90x200x16 cm (weiter Größen auf Anfrage)

### Eigenschaften:

Der Basiskern mit seiner Höhe von 10cm ermöglicht eine noch bessere Aufnahme von Personen mit hohem Körpergewicht bis 200 kg. Die patentierte *Rhombo-Therm*<sup>®</sup> Stanzung fördert die Punktelastizität sowie die Druckverteilung durch Auflösen der Oberflächenspannung.

### Einsatzbereich:

**Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag. Durch den progressiven Aufbau unterstützt die Matratze bis zu einem Körpergewicht von 200 kg.**