


## ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE **Memory Touch**

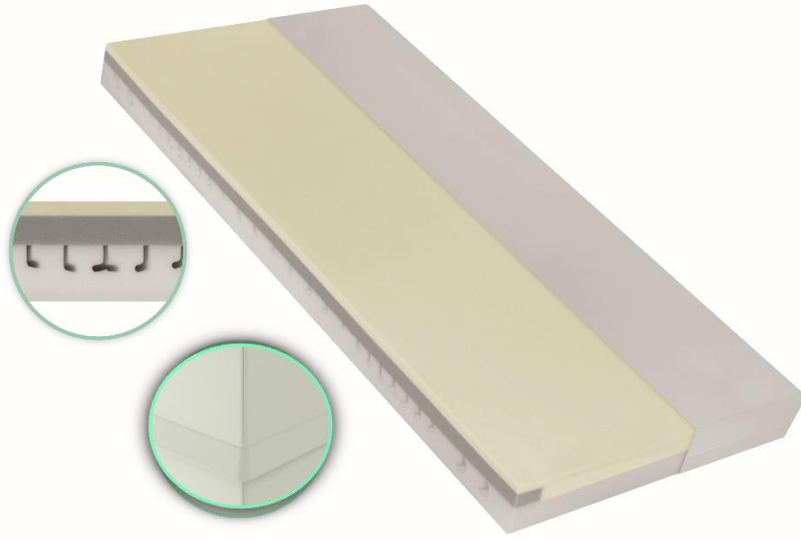

Die Pflegematratze Memory Touch besteht aus einer hochelastischen Basisschicht aus Kaltschaum und einer oberen Schicht aus elastischem Visco-Schaum mit integrierter Seitenrandverstärkung. Die besondere Zusammensetzung des Visco-Schaums ermöglicht, dass das Material bereits bei leichtem Druck nachgibt und der Körper des Liegenden weich in die Matratze einsinken kann. Dabei bildet sich eine Vertiefung, die ganz exakt an die Körperkonturen des Schlafenden angepasst ist. Die dadurch vergrößerte Auflagefläche sorgt für eine hervorragende Druckverteilung und eine dauerhafte Entlastung der Gelenke und Wirbelsäule. So wird der gesamte Körper optimal geschont und kann sich von den Belastungen erholen.

### Matratzenkonstruktion:

Kern: ca. 14 cm hoher Kern auf Kaltschaumbasis mit Zonenunterteilung und hochelastischer Visco-Schaumstoffauflage (RG50) inklusive integrierter Seitenrandverstärkung

Format: 90x200x14 cm (weitere Größen auf Anfrage)

### Einsatzbereich:

**Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag.**

**Empfohlenes Patientengewicht: 20 – 130 kg**

## ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE Memory Touch



### Memory Touch mit Semy-Plus Bezug

**Farbe:** silbergrau

**Rundum:**

polyurethan-kaschiertes PES-Textil  
längs- und querelastisch  
wasserdicht, bakteriendicht  
schwer entflammbar

waschbar **bis 95°C**

### Memory Touch mit Semy-Plus EVA Bezug

**Farbe:** blau/schwarz

**Oberseite und seitlich:**

polyurethan-kaschiertes PES-Textil  
längs- und querelastisch  
wasserdicht, bakteriendicht  
schwer entflammbar

**Unterseite:**

100% Polyester  
Gurtbänder mit Klettverschluss  
Griffschlaufen zur Evakuierung

waschbar **bis 95°C**

